

MC3 & MC2
НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕДИ

QUALITY ОТКРОЙТЕ ЗАНОВО НАСТОЯЩИЙ СВЕТ

Теперь подсветка LED доступна для старых микромоторов MC3 LK и MC2 Isolite 300 с классической подсветкой благодаря комплекту апгрейда, с которым совместимы инструменты Micro-Series.



Компания Bien-Air имеет репутацию ведущего производителя электрических микромоторов. И это не случайно.

Мощность, высокий крутящий момент, отсутствие вибраций и надёжность – вот преимущества микромоторов компании Bien-Air, делающие их уникальными.




3

Для светодиодной подсветки своих микро-моторов Micro-Series компания Bien-Air стремится максимально использовать лучшие материалы и все возможности современной техники, которые гарантируют высокую эффективность и непревзойдённую надёжность. Светодиодная подсветка компании Bien-Air обеспечивает невероятное удобство работы. Интенсивность подсветки регулируется в пределах от 0 до 38 000 люксов. Она значительно улучшает обзор рабочей зоны, освещая её естественным белым светом.

Цветовая температура светодиодной лампы, равная 4500 К, идеальна для освещения без искажений цвета дентина, пульпы или дёсен. Кроме того, такая подсветка упрощает диагностику. Герметичный корпус лампы гарантированно выдержит многократное использование в течение долгих лет.

Со светодиодной подсветкой компании Bien-Air Вы заново откроете для себя настоящий свет.

Благодаря спиральной катушке ротора микромотор MC3 работает без толчков даже на самых низких оборотах.

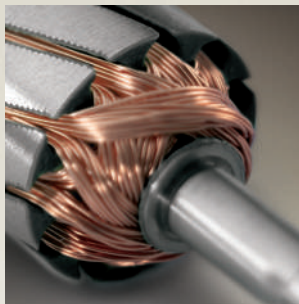

MC3 LED

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, со светодиодной подсветкой и внутренним распылителем, съёмная муфта, совместим с переходником типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600680-001

MC3 LK

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, с подсветкой и внутренним распылителем, съёмная муфта, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600077-001

Комплект MC3 LK + шланг 4VR 400

Арт. 1700046-001

Комплект MC3 LK + шланг 4VLM

Арт. 1700336-001

MC3 IR

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, съёмная муфта, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600071-001

Комплект MC3 IR + шланг 4VLM

Арт. 1700337-001

Комплект замены светодиодной подсветки + инструменты Micro-Series

Для микромотора MC3 LK
Арт. 1501370-001



МИКРОМОТОР MC3 НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕДИ



5

Микромоторы MC3 отличаются впечатляющей производительностью. Их без преувеличения можно назвать самыми производительными микромоторами с углеродными щётками в мире.

Универсальные микромоторы отлично работают в диапазоне от 60 до 40 000 об/мин. Управляемые прибором PLMP 021, микромоторы MC3 работают без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты вращения к более высокой, а также могут вращаться в обоих направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах. Кроме того, вращающийся на 400° переходник шланга 4VR 400 делает микро-

мотор MC3 удобным и манёвренным, что играет существенную роль в повседневной работе. Микромоторы MC3 и прибор управления PLMP 021 легко адаптируются к любым пневматическим или электрическим стоматологическим установкам.

Не имеющие себе равных микромоторы, совместимые с инструментами Micro-Series. Также предлагаются в комплектации с регулируемой светодиодной подсветкой. Теперь в продаже комплект апгрейда инструментов Micro-Series и светодиодной подсветки для старой модели MC3 LK.



МИКРОМОТОР MC2 САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ В МИРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР



Микромоторы MC2 на протяжении многих лет доказывают свою надёжность и безотказность. Благодаря частоте вращения от 60 до 40 000 об/мин рабочие возможности модели впечатляют. Управляемые прибором PLMP 021, микромоторы MC2 работают без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты вращения к более высокой, а также могут вращаться в обоих направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах. Микромоторы MC2 и прибор управления PLMP 021 легко адаптируются к любым пневматическим или электрическим стоматологическим установкам.

Разработанный и произведённый в Швейцарии, микромотор MC2 предлагается по привлекательной цене. Совместим с инструментами Micro-Series, в наличии также с регулируемой светодиодной подсветкой. Также предлагается специальный комплект апгрейда для модернизации старой модели MC2 Isolite 300.



Позолоченный щёткодержатель микромотора MC2 обеспечивает постоянный электрический контакт.



MC2 LED

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, совместим с переходником типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600681-001

MC2 Isolite 300

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, подсветка, внутренний распылитель, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600078-001

Комплект замены светодиодной подсветки + инструменты Micro-Series

Для микромотора MC2 Isolite 300
Арт. 1501369-001

MC2 IR

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964
Арт. 1600073-001

MC2 GTAV

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки и распылителя, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964, самоохлаждение
Арт. 1600075-001

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
Case postale
2500 Bienne 6, Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64
Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Bien-Air France Sàrl
55-57, avenue Jean Lolive
93508 Pantin Cedex
France
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70
Fax +33 (0)1 48 96 07 40
ba-f@bienair.com

Bien-Air España SA
Entença, 169 Bajos
08029 Barcelona, España
Tel. (+34) 934 25 30 40
Fax (+34) 934 23 98 60
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.
Medical Technologies
5 Corporate Park
Suite 160
Irvine, CA 92606, USA
Phone 1-800-433-BIEN
Phone 949-477-6050
Fax 949-477-6051
ba-usa@bienair.com

Bien-Air UK Ltd
Arundel House
Unit 1 - Ground Floor
Amberley Court
Whitworth Road
Crawley, West Sussex,
RH11 7XL, England
Tel. +44 (0)1293 550200
Fax +44 (0)1293 520481
ba-uk@bienair.com

Internet:
www.bienair.com

Bien-Air
Deutschland GmbH
Jechtinger Straße 11
79111 Freiburg, Deutschland
Tel. +49(0)761 45 57 40
Fax +49(0)761 47 47 28
ba-d@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.
Via Vaina 3
20122 Milano, Italia
Tel. +39(02) 58 32 12 51/52/54
Fax +39(02) 58 32 12 53
ba-i@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.
Nishi-Ikebukuro
Daiichi-Seimei Bldg. 10F
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku
Tokyo, 171-0014, Japan
ビエン・エア・アジア株式会社 (製造販売元)
〒171-0014
東京都豊島区池袋2-40-12
西池袋第一生命ビルディング10F
Tel. +81 (3) 5954-7661
Fax +81 (3) 5954-7660
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air
Medical Instrument
Technology Service Co. Ltd.
Room 907, The Exchange Beijing,
No 118 Jian Guo Lu Yi,
Chao Yang District,
Beijing 100022, China
北京彼岸医疗器械
技术服务有限公司
北京市朝阳区建国路
乙118号招商局中心
京汇大厦907室
电话 +86 10 6567 0651
传真 +86 10 6567 8047
ba-beijing@bienair.com