

Bien Air<sup>+</sup>  
Dental

www.goldident.ru



MC3 & MC2  
НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕДИ

[www.goldident.ru](http://www.goldident.ru)

QUALITY 

ОТКРОЙТЕ ЗАНОВО НАСТОЯЩИЙ СВЕТ

Теперь подсветка LED доступна для старых микромоторов MC3 LK и MC2 Isolite 300 с классической подсветкой благодаря комплекту апгрейда, с которым совместимы инструменты Micro-Series.



Компания Bien-Air имеет репутацию ведущего производителя электрических микромоторов. И это не случайно.

Мощность, высокий крутящий момент, отсутствие вибраций и надёжность – вот преимущества микромоторов компании Bien-Air, делающие их уникальными.




3

Для светодиодной подсветки своих микро-моторов Micro-Series компания Bien-Air стремится максимально использовать лучшие материалы и все возможности современной техники, которые гарантируют высокую эффективность и непревзойдённую надёжность. Светодиодная подсветка компании Bien-Air обеспечивает невероятное удобство работы. Интенсивность подсветки регулируется в пределах от 0 до 38 000 люксов. Она значительно улучшает обзор рабочей зоны, освещая её естественным белым светом.

Цветовая температура светодиодной лампы, равная 4500 К, идеальна для освещения без искажений цвета дентина, пульпы или дёсен. Кроме того, такая подсветка упрощает диагностику. Герметичный корпус лампы гарантированно выдержит многократное использование в течение долгих лет.

Со светодиодной подсветкой компании Bien-Air Вы заново откроете для себя настоящий свет.

Благодаря спиральной катушке ротора микромотор MC3 работает без толчков даже на самых низких оборотах.

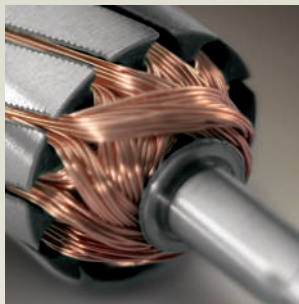

#### **MC3 LED**

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, со светодиодной подсветкой и внутренним распылителем, съёмная муфта, совместим с переходником типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600680-001

#### **MC3 LK**

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, с подсветкой и внутренним распылителем, съёмная муфта, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600077-001

#### **Комплект MC3 LK + шланг 4VR 400**

Арт. 1700046-001

#### **Комплект MC3 LK + шланг 4VLM**

Арт. 1700336-001

#### **MC3 IR**

Микромотор с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, съёмная муфта, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600071-001

#### **Комплект MC3 IR + шланг 4VLM**

Арт. 1700337-001

#### **Комплект замены светодиодной подсветки + инструменты Micro-Series**

Для микромотора MC3 LK  
Арт. 1501370-001





# МИКРОМОТОР MC3 НА НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ВПЕРЕДИ



5

Микромоторы MC3 отличаются впечатляющей производительностью. Их без преувеличения можно назвать самыми производительными микромоторами с угольными щётками в мире.

Универсальные микромоторы отлично работают в диапазоне от 60 до 40 000 об/мин.

Управляемые прибором PLMP 021, микромоторы MC3 работают без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты вращения к более высокой, а также могут вращаться в обоих направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах. Кроме того, вращающийся на 400° переходник шланга 4VR 400 делает микро-

мотор MC3 удобным и манёвренным, что играет существенную роль в повседневной работе. Микромоторы MC3 и прибор управления PLMP 021 легко адаптируются к любым пневматическим или электрическим стоматологическим установкам.

Не имеющие себе равных микромоторы, совместимые с инструментами Micro-Series. Также предлагаются в комплектации с регулируемой светодиодной подсветкой. Теперь в продаже комплект апгрейда инструментов Micro-Series и светодиодной подсветки для старой модели MC3 LK.



# МИКРОМОТОР MC2 САМЫЙ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ В МИРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР



Микромоторы MC2 на протяжении многих лет доказывают свою надёжность и безотказность. Благодаря частоте вращения от 60 до 40 000 об/мин рабочие возможности модели впечатляют. Управляемые прибором PLMP 021, микромоторы MC2 работают без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты вращения к более высокой, а также могут вращаться в обоих направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких оборотах. Микромоторы MC2 и прибор управления PLMP 021 легко адаптируются к любым пневматическим или электрическим стоматологическим установкам.

Разработанный и произведённый в Швейцарии, микромотор MC2 предлагается по привлекательной цене. Совместим с инструментами Micro-Series, в наличии также с регулируемой светодиодной подсветкой. Также предлагается специальный комплект апгрейда для модернизации старой модели MC2 Isolite 300.



Позолоченный щёткодержатель микромотора MC2 обеспечивает постоянный электрический контакт.



www.goldident.ru

#### **MC2 LED**

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, светодиодная подсветка, внутренний распылитель, совместим с переходником типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600681-001

#### **MC2 Isolite 300**

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, подсветка, внутренний распылитель, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600078-001

#### **Комплект замены светодиодной подсветки + инструменты Micro-Series**

Для микромотора MC2 Isolite 300  
Арт. 1501369-001

#### **MC2 IR**

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки, внутренний распылитель, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964  
Арт. 1600073-001

#### **MC2 GTAV**

Микроmotor с угольными щётками, 60 - 40 000 об/мин, без подсветки и распылителя, переходник типа E в соответствии с нормами ISO 3964, самоохладжение  
Арт. 1600075-001

Bien-Air Dental SA  
Länggasse 60  
Case postale  
2500 Bienne 6, Switzerland  
Tel. +41 (0)32 344 64 64  
Fax +41 (0)32 344 64 91  
dental@bienair.com

Bien-Air France Sàrl  
55-57, avenue Jean Lolive  
93508 Pantin Cedex  
France  
Tel. +33 (0)1 41 83 60 70  
Fax +33 (0)1 48 96 07 40  
ba-f@bienair.com

Bien-Air España SA  
Entença, 169 Bajos  
08029 Barcelona, España  
Tel. (+34) 934 25 30 40  
Fax (+34) 934 23 98 60  
ba-e@bienair.com

Bien-Air USA, Inc.  
Medical Technologies  
5 Corporate Park  
Suite 160  
Irvine, CA 92606, USA  
Phone 1-800-433-BIEN  
Phone 949-477-6050  
Fax 949-477-6051  
ba-usa@bienair.com

Bien-Air UK Ltd  
Arundel House  
Unit 1 - Ground Floor  
Amberley Court  
Whitworth Road  
Crawley, West Sussex,  
RH11 7XL, England  
Tel. +44 (0)1293 550200  
Fax +44 (0)1293 520481  
ba-uk@bienair.com

Internet:  
www.bienair.com

Bien-Air  
Deutschland GmbH  
Jechtinger Straße 11  
79111 Freiburg, Deutschland  
Tel. +49(0)761 45 57 40  
Fax +49(0)761 47 47 28  
ba-d@bienair.com

Bien-Air Italia s.r.l.  
Via Vaina 3  
20122 Milano, Italia  
Tel. +39(02) 58 32 12 51/52/54  
Fax +39(02) 58 32 12 53  
ba-i@bienair.com

Bien-Air Asia Ltd.  
Nishi-Ikebukuro  
Daiichi-Seimei Bldg. 10F  
2-40-12 Ikebukuro, Toshimaku  
Tokyo, 171-0014, Japan  
ビエン・エア・アジア株式会社 (製造販売元)  
〒171-0014  
東京都豊島区池袋2-40-12  
西池袋第一生命ビルディング10F  
Tel. +81 (3) 5954-7661  
Fax +81 (3) 5954-7660  
ba-asia@bienair.com

Beijing Bien-Air  
Medical Instrument  
Technology Service Co. Ltd.  
Room 907, The Exchange Beijing,  
No 118 Jian Guo Lu Yi,  
Chao Yang District,  
Beijing 100022, China  
北京彼岸医疗器械  
技术服务有限公司  
北京市朝阳区建国路  
乙118号招商局中心  
京汇大厦907室  
电话 +86 10 6567 0651  
传真 +86 10 6567 8047  
ba-beijing@bienair.com