



LINDAR

Чистота как стандарт

Моечно-дезинфицирующая система
для медицинских инструментов
Регистрационный номер медицинского изделия:
Г004-00110-00/05810787 Класс 2а



ФИЛОСОФИЯ

Когда стерильность становится философией

LINDAR - это не просто оборудование. Это принцип, положенный в основу ежедневной практики: безопасность пациента начинается с инструмента, который прошёл безупречную обработку.

Каждый цикл - подтверждение обязательств клиники. Каждая деталь системы подчинена одной цели: дать врачу уверенность, а пациенту - доверие.

«Стерильность - это не процесс. Это культура.»

ПРЕИМУЩЕСТВА

Четыре принципа, на которых стоит LINDAR



Безупречная обработка

Термическая дезинфекция при 93° - гарантия полного удаления биологических загрязнений.



Экономия ресурсов

Точная дозировка воды и моющих средств. Каждый цикл - рациональное использование ресурсов клиники.



Интуитивное управление

Панель с понятными индикаторами и готовыми программами. Обучение персонала занимает минуты.



Надёжность каждый день

Корпус из нержавеющей стали, проверенные узлы, защита от перегрузок. Система рассчитана на интенсивную эксплуатацию.



Опциональная подкатная тумба LI

Свобода и удобство размещения в любом кабинете без стационарного монтажа.



Удвоенная загрузка

Опциональная верхняя корзина вдвое больше инструментов за один цикл обработки.

ТЕХНОЛОГИЯ

Система, рождённая из ТОЧНОСТИ

Каждая программа LINDAR это точный инженерный алгоритм. Пять программ последовательно обеспечивают результат, который можно измерить и воспроизвести. Включает в себя режим самоочистки системы.

ЦИКЛ ОБРАБОТКИ

01

Предварительная промывка

Удаление крупных загрязнений и защита от коагуляции белка перед основным циклом.

02

Основная мойка

Полиферментное моющее средство. Точная автоматическая дозировка — от 15 до 30 мл под выбранную программу.

03

Термическая дезинфекция

Температура воды до 93°C. Соответствие международному стандарту ISO 15883.

04

Протоколирование

Автоматическая печать отчёта и сохранение данных на USB. Полная прослеживаемость каждого цикла (опция).

ПРИМЕНЕНИЕ

Там, где точность не допускает ошибки

LINDAR работает там, где цена ошибки измеряется здоровьем. Три ключевые сферы применения - три уровня ответственности, для которых создана система.



ХИРУРГИЯ

Предстерилизационная очистка и термическая дезинфекция хирургических инструментов. Подготовка к финальной стерилизации в автоклаве.



СТОМАТОЛОГИЯ

Наконечники, боры, зеркала, щипцы, пинцеты. До 24 наконечников и более 100 инструментов за один цикл.




ЛАБОРАТОРИИ

Мойка лабораторной посуды, колб и пипеток. Встроенная система смягчения воды (6 уровней) минимум накипи на стекле.

АНАТОМИЯ

Каждая деталь имеет значение

LINDAR собран из узлов, где каждый элемент решает конкретную задачу. От корпуса до форсунок - инженерия, подчинённая одной цели: чистоте без компромиссов.

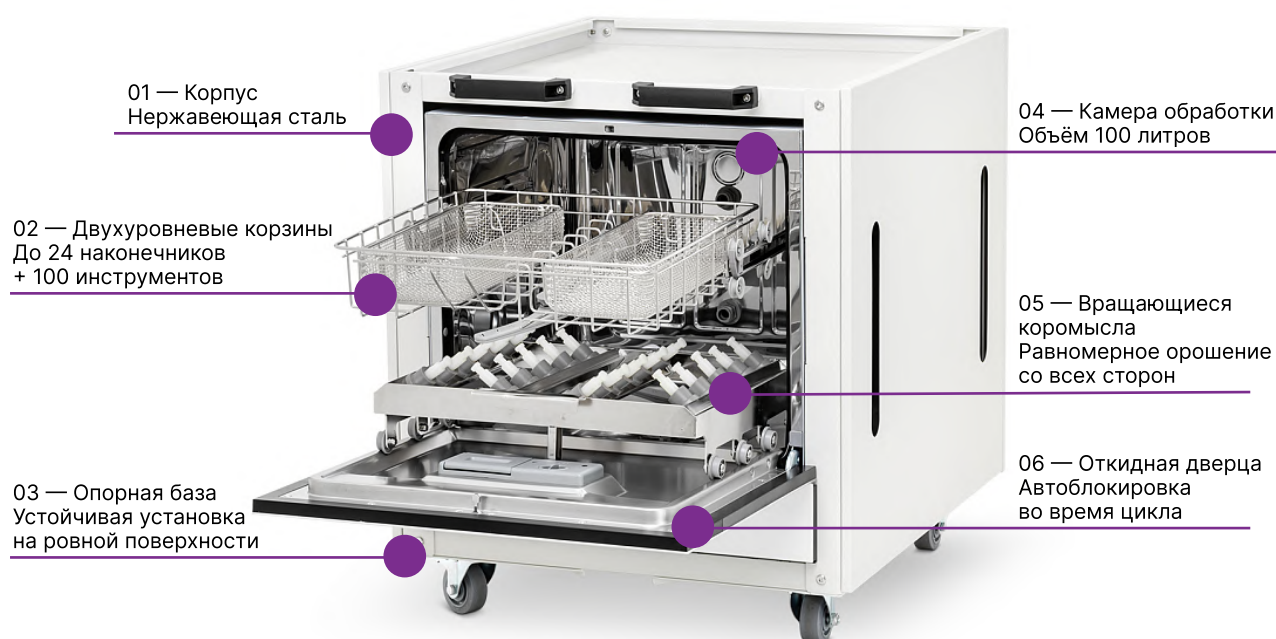

ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ

Многopараметрический дисплей
с контролем температуры



ДВУХУРОВНЕВЫЕ КОРЗИНЫ

Универсальная корзина
+ поднос для наконечников



ВРАЩАЮЩИЕСЯ КОРОМЫСЛА

Орошение под давлением со всех сторон



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические параметры

Готов к интеграции в любой кабинет компактные габариты, стандартное электроподключение и низкий уровень шума. Полное соответствие стандарту ISO 15883.

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Размеры (Ш × Г × В)	595 × 550 × 620 мм
Вес нетто	38 кг
Объем камеры	100 л
Материал корпуса	нержавеющая сталь

ВОДА

Давление на входе	0,04 – 1,00 МПа
Температура на входе	5 – 40 °С
Расход за цикл	6 – 13 л
Смягчение воды	6 уровней (H1 – H6)

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Напряжение	220 В переменного тока
Частота	50 / 60 Гц
Потребляемая мощность	до 1,7 кВт
Класс защиты	заземление

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Программ обработки	5 предустановленных
Температура мойки	до 93 °С
Время цикла	20 – 105 мин
Уровень шума	50 дБ

В КОМПЛЕКТЕ

КОРЗИНА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
Универсальная корзина для
общехирургического инструмента

ПОДНОС ДЛЯ НАКОНЕЧНИКОВ
До 24 наконечников с резиновыми
посадочными местами