



Cefla Dental Group воплощает в жизнь передовые технические решения для стоматологов всего мира  
Cefla - Via Selice Provinciale, 23/a  
40026 Imola - Bo (Италия)

**ООО «Новгодент»**

356003, Россия, г.Ставрополь, ул.Мира, 367/21  
Телефоны: +7-962-446-82-19, +7-968-267-22-35, \*7(8652) 525-888  
[novgodent.ru](http://novgodent.ru)

**ООО «Новгодент-М»**

Россия, г.Москва, ул.Судостроительная, 10  
Телефон в Москве: +7(495)989-51-66  
Многоканальный телефон: +7(800)775-18-71 (звонок по России бесплатно)  
[fordent.ru](http://fordent.ru)

# ПОЗИТИВНО ВАШИ



## V100 (AM8015)

## VICTOR

02/2015

[www.goldident.ru](http://www.goldident.ru)



[www.cefladentale.com](http://www.cefladentale.com)



# VICTOR

## VICTOR

## ПРОЧЬ

## ОТ ЗАУРЯДНОСТИ

Мы уверены: Установка V100 обладает всеми необходимыми характеристиками, благодаря уникальному дизайну итальянской группы производителей и отточенным принципам экономичного производства ко всему технологическому процессу, сертифицированному в соответствии с ISO 13485 и ISO 9001.

Реальная мощность: динамическая система подачи сжатого воздуха обеспечивает непревзойденную эффективность инструментов, благодаря чему стоматолог может безопасно работать при любых обстоятельствах.

Простота и практичность достигли в этой стоматологической установке непревзойденного уровня. При первом использовании V100 вы будете приятно удивлены ... а потом просто не сможете обойтись без нее.



[www.goldident.ru](http://www.goldident.ru)

# U100






U100

# МИР ДИЗАЙНА

Стиль в каждой детали

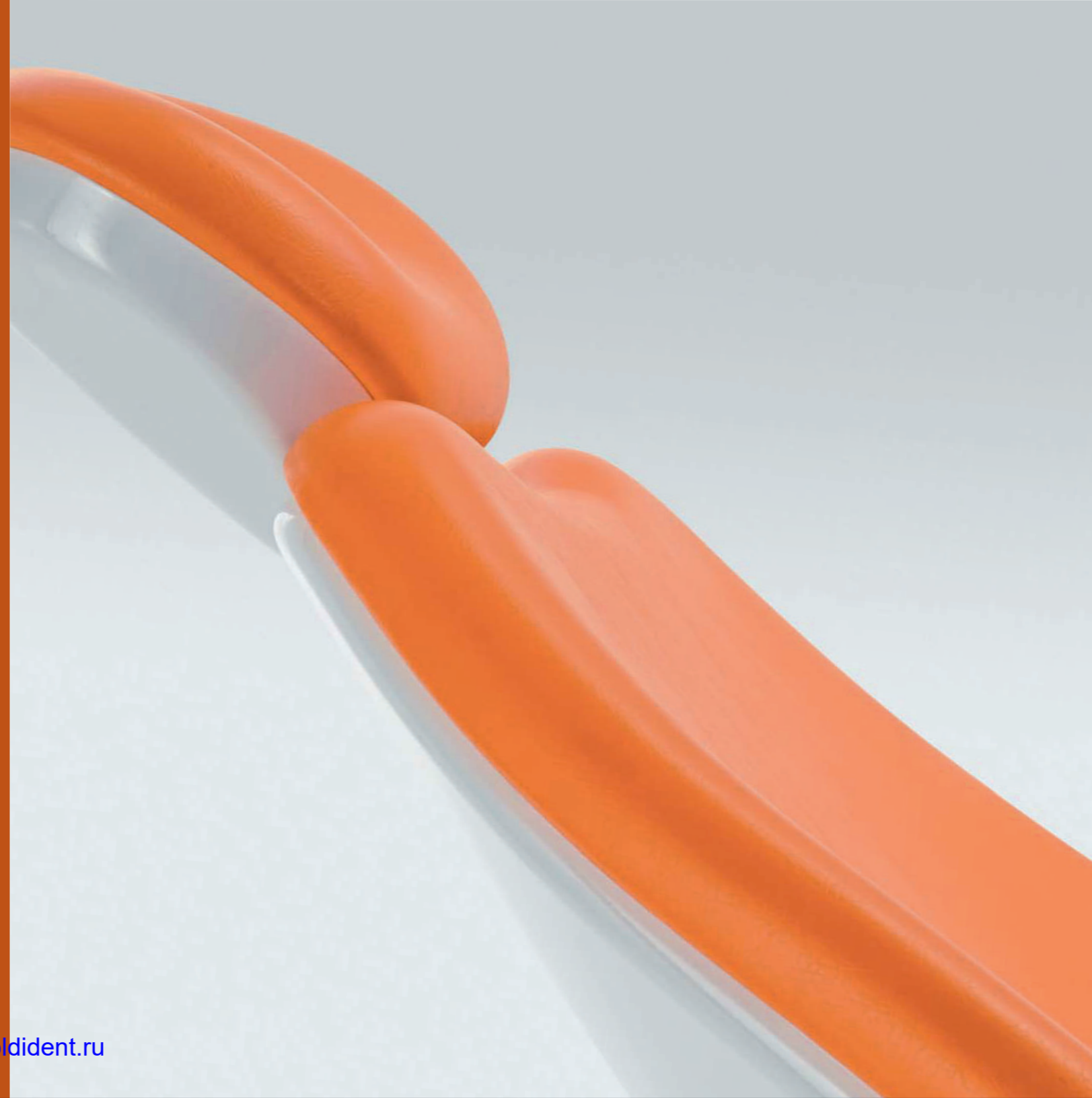

V100

# МИР ДИЗАЙНА

## Прирожденное качество

V100 – плод незыблемых промышленных традиций и передовых методов производства. Это концепция, которая сочетает в себе непревзойденный дизайн и практичность. Плавные линии определяют геометрию материалов, специально выбранных благодаря их прочности и способности придать установке исключительную устойчивость.

Обеспечивающее максимальный комфорт кресло пациента с электромеханическим приводом, оснащено регулируемым подголовником и двумя подлокотниками и имеет 2 предварительно запрограммированных положения и еще 4, которые может персонализировать пользователь.

Кресло пациента с прочным железным основанием и конструктивными элементами может опускаться до минимальной высоты 470 мм. При регулировке положения кресла по высоте вместе с креслом перемещается закрепленный корпус установки и блок врача.

Тщательный выбор материалов, таких как специальные пластмассы и стальной каркас, придает стоматологической установке еще большую прочность и надежность, а также высокую эстетичность.

Стул врача имеет усиленное, регулируемое по высоте сиденье.


Технологический процесс, осуществляемый в соответствии с критериями экономичного производства, завершается строжайшим выходным контролем качества, выполняемым опытными специалистами.



V100

# ВОПРОС ИНТУИЦИИ

Включите установку ....  
и отбросьте сомнения

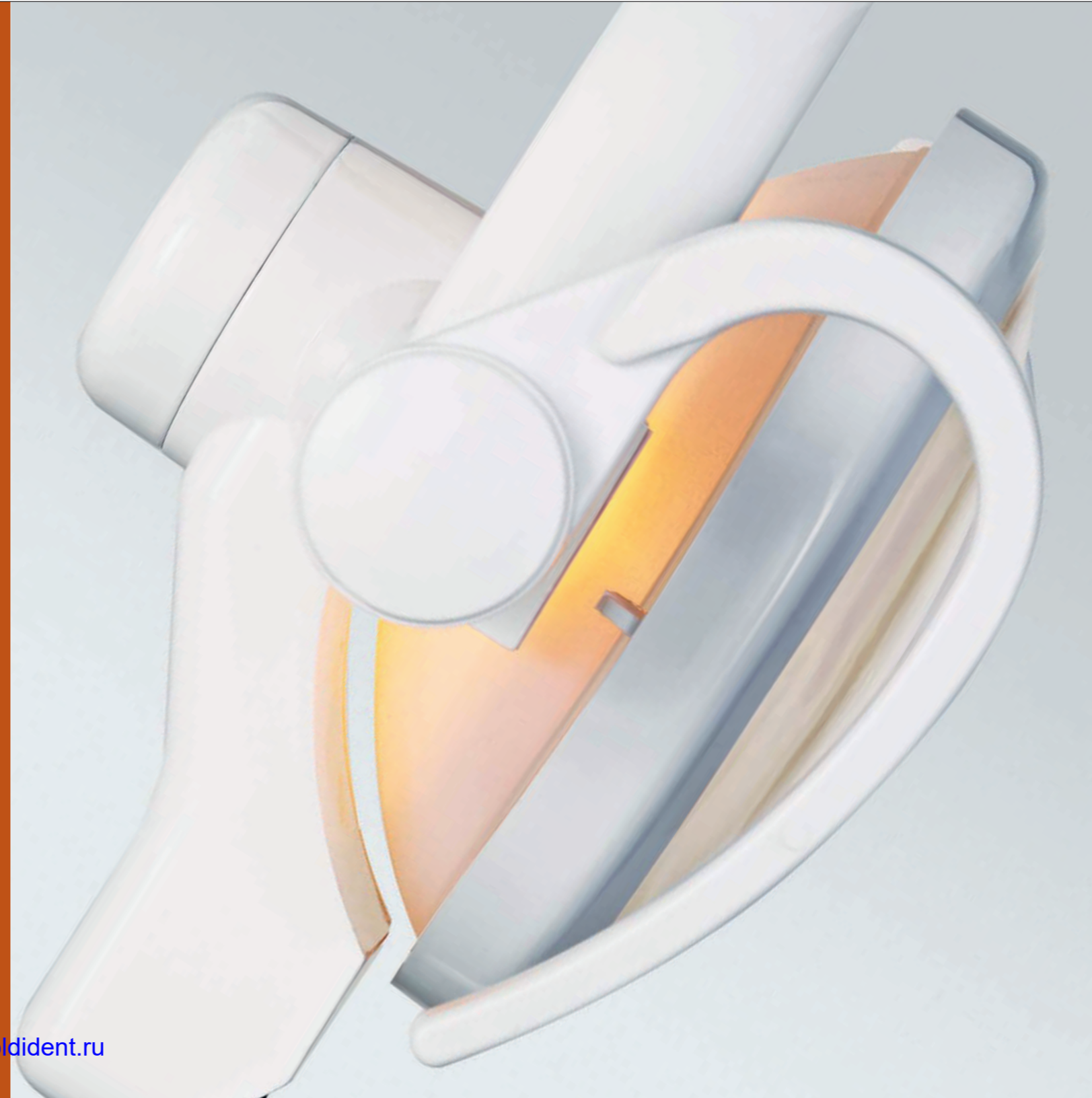



V100

# ВОПРОС ИНТУИЦИИ

## Мы знаем, что вам нужно

Как только вы включите установку, вы поймете, что V100 – это правильный выбор. Мощные инструменты с блокировкой обратного всасывания жидкости. Плавное движение благодаря сверхэргономичному модулю врача с верхней подачей инструментов. Неожиданный комфорт регулируемого корпуса установки, доступ к которому открыт с обеих сторон.

Система верхней подачи инструментов позволяет облегчить рабочий процесс, снижает нагрузку на запястья и исключает возможность перемещения блока врача во время лечения.

В дополнение к максимальной надежности, пневматическая система также обеспечивает динамичную мощность инструментов, которая выходит далеко за рамки стандартных решений.

Встроенный в систему всасывания фильтр Dügg легко снимается, что облегчает чистку.

Положение корпуса установки можно менять, чтобы дать ассистенту больше места и облегчить регулярное техническое обслуживание.

Так как установка открыта с обеих сторон, это сильно упрощает техническое обслуживание, чистку и проверку уровня воды в бутылке, а также осмотр системы всасывания и сепаратора амальгамы (при наличии).



V100

# СУХИЕ ФАКТЫ

Готовность к работе –  
постоянная





V100

# СУХИЕ ФАКТЫ

## Точность и уверенность

V100 укомплектована простой, эффективной пневматической системой, которая максимально увеличивает надежность и долговечность установки. Подача питания, сжатого воздуха и воды осуществляется с помощью одного переключателя. Установка включается одним щелчком переключателя и работает до тех пор, пока вам необходимо.

Движение кресла пациента активирует две простых предохранительных системы: одна не дает креслу опускаться, если сиденье или спинка натолкнутся на препятствие, вторая временно отключает динамические инструменты.

И врач, и ассистент со своих блоков могут управлять перемещением кресла пациента и динамикой всей системы. Плавность движения блока врача обеспечивается благодаря пневматической системе торможения. Блок вмещает до 5 инструментов.

Положение подголовника легко изменять даже одной рукой, что позволяет быстро и просто регулировать положение головы пациента именно так, как вам нужно.

С помощью многофункциональной ножной педали можно включать и выключать инструменты, а также активировать и деактивировать функции Chip Air и Chip Water.

Консоль ассистента может быть укомплектована трехфункциональным шприцом из нержавеющей стали, хирургической и аспирационной системами.



U100

# ПОВОД ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

Основные принципы



V100

# ПОВОД ДЛЯ УВЕРЕННОСТИ

## В целости и сохранности

С V100 вы в надежных руках: при проектировании этой стоматологической установки гигиене придавалось первостепенное значение. Установка, конструкция которой предотвращает риск заражения у источника, оснащена активными системами, которые обеспечивают максимальную эффективность против размножения бактерий.

Встроенное устройство блокировки обратного всасывания жидкости не дает каплям, оставшимся на наконечнике инструмента, попадать внутрь, что сводит к минимуму риск перекрестного заражения.

Многие компоненты стоматологической установки были специально разработаны для того, чтобы облегчить чистку. Силиконовый лоток и коврики для насадок на модуле стоматолога можно стерилизовать в автоклаве. Наполнитель стакана и чаши является съемным, чаша плевательницы изготовлена из керамики.

Все поверхности стоматологического блока, включая обивку, можно мыть с помощью специальных моющих средств. Передняя крышка на модуле стоматолога также снимается для тщательной чистки.

Находящаяся внутри установки, однако легко вынимаемая из ее нижней части бутылка емкостью 1,8 л под давлением обеспечивает независимую подачу воды для распыления.

В корпусе установки также находятся система всасывания с трубкой Вентури и широким фильтром, сепаратор воздух-вода и водонагреватель.





U100

# ЭКСТРА

Повысьте эффективность работы благодаря эксклюзивным дополнительным функциям

- Готово к подключению всасывающего контура
- Полный комплект для разделения амальгамы и жидкости
- Пьезоэлектрический или воздушный скейлер
- Фотополимерная лампа

## Мультимедиа

Установку можно укомплектовать мультимедийной системой, состоящей из внутриротовой камеры и ЖК-экрана диагональю 17 дюймов с международной гарантией.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 230 В постоянного тока/115 В переменного тока, частота 50/60 Гц  
 Давление воды: 0,20–0,40 МПа/2,0–4,0 бар  
 Давление воздуха: 0,55–0,80 МПа/5,5–8,0 бар  
 Всасывание: ≥ 55 л/мин (вода (канал Вентури)) ≥ 120 л/мин (воздух (канал Вентури))

CE 0197

[www.goldident.ru](http://www.goldident.ru)

U100

# СТИЛЬ

Выберите последний штрих

