

# Я ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ


**GoldiDent<sup>™</sup>**  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

**PSPiX<sup>2</sup>**

Первый  
компактный сканер  
рентгенографических  
пластин



# НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОНТРАСТ ДЛЯ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ

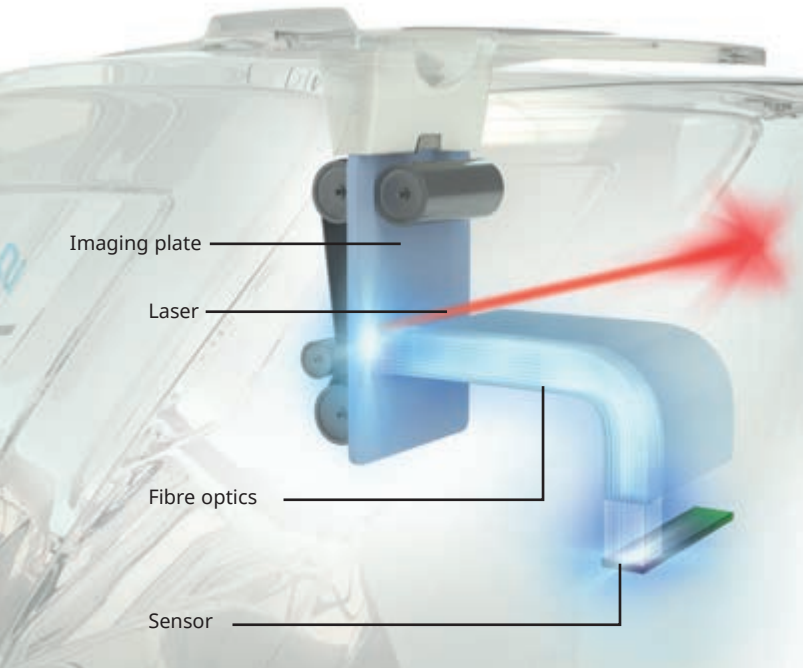

Более ИННОВАЦИОННЫЙ


**Лучшая дифференциация  
окружающих тканей**

PSPIX<sup>2</sup>® превосходит ожидания от рентгенографического исследования, предоставляя **четкую дифференциацию окружающих зуб тканей.**

Эту технологическое достижение мы назвали **FIBER2PIXEL®**

С ФИБРОВООПТИКОЙ - FIBER2PIXEL®

БЕЗ ФИБРОВООПТИКИ

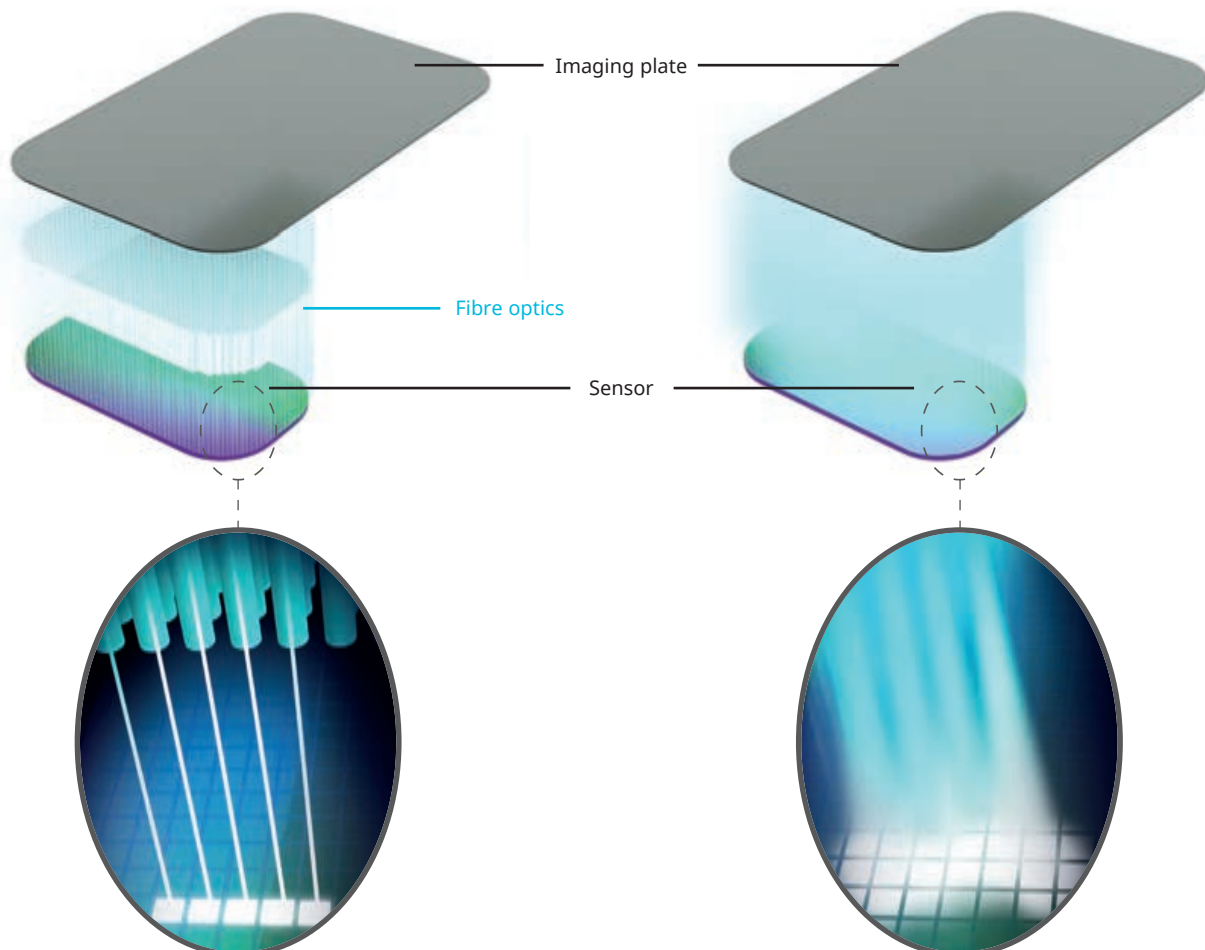



# 2 FIBER PIXEL

## Дифференциация окружающих тканей

Технология **FIBER2PIXEL®** основана на использовании **оптического фиброволокна широкого спектра** для управляемой передачи излучения фотонов на сканер для обеспечения **высококонтрастных изображений**.

## МЕНЕЕ ИНВАЗИВНЫЙ

### Более достоверная диагностика

Различные анатомические структуры, такие как кость, канал, пульпа... видны **с исключительной четкостью**.

Вы поставите диагноз **быстро и точно!**



# ПРЕВОСХОДНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБЫХ

## СНИМКИ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА


**GoldiDent**  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

С технологией **FIBER2PIXEL®**, PSPIX<sup>2</sup> предоставляет **точные изображения** высокого качества с **отличной контрастностью** для обеспечения **надежной диагностики**.


## СПРОЕКТИРОВАНО ДЛЯ ВАС

Для разных клинических случаев имеются разные размеры пластин.


Пародонтология

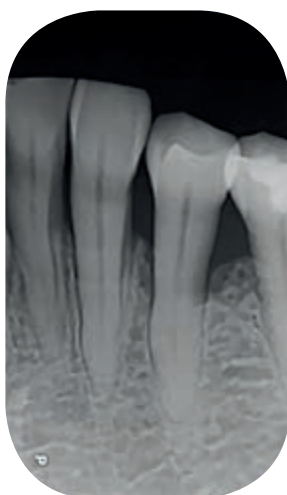

Эндодонтия

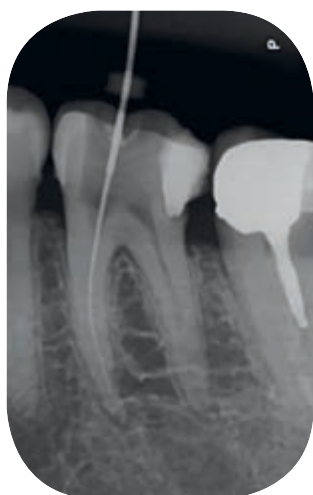

Ортодонтия

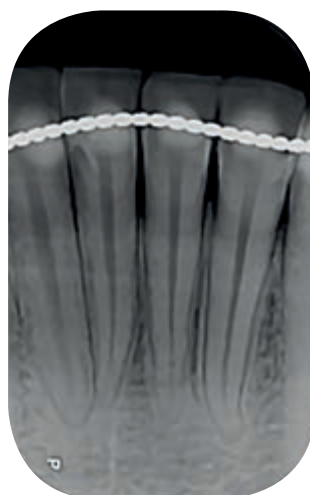


Детская  
стоматология




# КЛИНИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

**GoldiDent**<sup>W</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования


Cariology

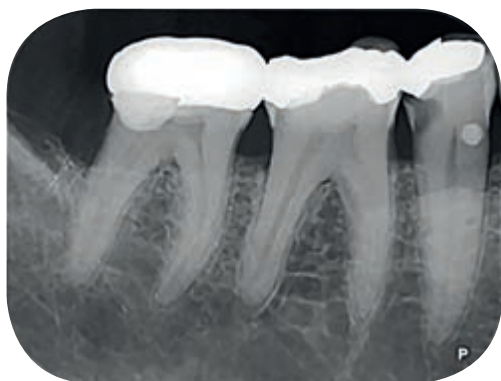

Bitewing

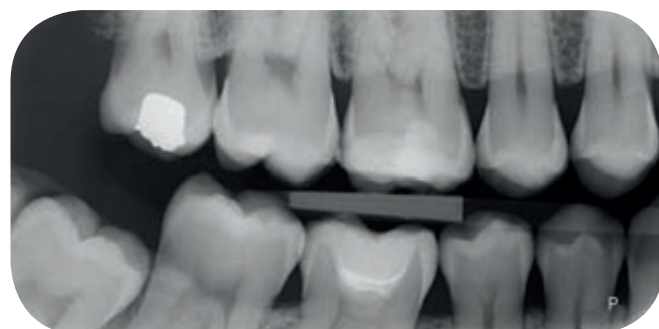

Occlusal

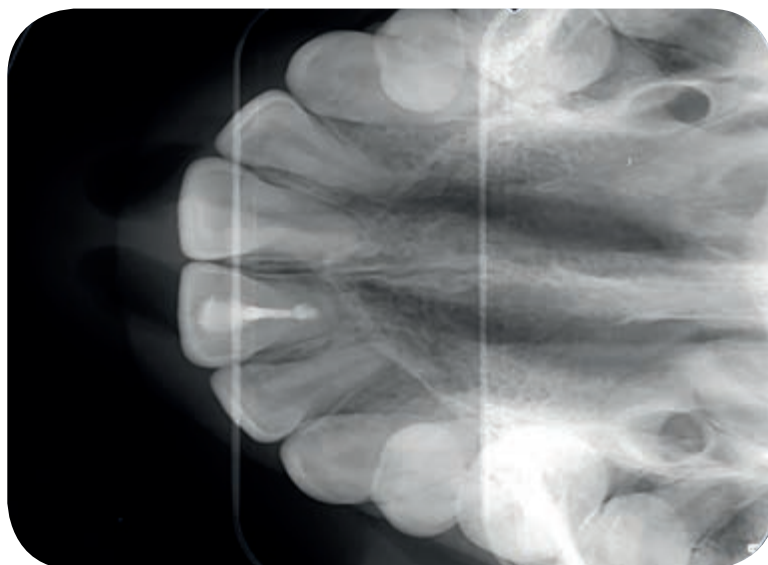

Implantology



## SOPRO IMAGING МОЩНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Чрезвычайно удобное программное обеспечение SOPRO Imaging предлагает **передовые инструменты обработки изображений для рентгеновских снимков.**

SOPRO Imaging поставляется с каждым аппаратом PSPIX<sup>2</sup> и совместимо с Windows или Mac.



# ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ

**GoldiDent**<sup>W</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

## СНИМАЙ И СКАНИРУЙ

С PSPIX<sup>2</sup> вы значительно экономите время!

- Вы получаете снимок за несколько секунд.
- У вас больше времени на пациента!



## PSPIX2

**ЭКОНОМНЫЙ**, гораздо надежнее и долговечнее визиографа

**ПРОСТОЙ**, вы сразу научитесь им пользоваться

**КОМПАКТНЫЙ**, самый маленький размер на рынке

**ЭЛЕГАНТНЫЙ**, он сразу впишется в ваш интерьер



# ПРОСТОЙ И ПОНЯТНЫЙ СКАНЕР

PSPIX<sup>2</sup> ТАКОЙ ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ,  
ЧТО ВАМ ЕЩЕ НИКОГДА НЕ БЫЛО ТАК ПРОСТО!

**GoldiDent**<sup>™</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

## КОМПАКТНЫЙ

Созданный по новейшей инновационной технологии, и по самым современным стандартам дизайна, PSPIX<sup>2</sup> стал самым маленьким и компактным сканером на рынке.

## ТАКОЙ ПРОСТОЙ

Большой цветной сенсорный экран позволит вам интуитивно и легко использовать сканер в работе.

## СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

PSPIX<sup>2</sup> со своим элегантным дизайном легко впишется в любой интерьер.

## НАСТОЯЩИЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Практический процесс никогда не был настолько легким и эффективным благодаря своим выдающимся интеллектуальным способностям.

Реальная эволюция в вашей рабочей практике!





Peter Doe  
John Smith



ACTEON

# НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ВАС

**GoldiDent**<sup>™</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования



## ГИБКОСТЬ

Тонкие и очень гибкие пластины для PSPiX<sup>2</sup> легко использовать и очень комфортные для пациента.

## ВЫБЕРИТЕ СВОЙ РАЗМЕР

Разные размеры пластин для разных пациентов и для любой клинической ситуации.



\* Computer reconstruction of size 4 image from three size 3 imaging plates.

# И ДЛЯ ВАШИХ ПАЦИЕНТОВ

**GoldiDent**<sup>™</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования



*«Разные пациенты - формы языка, челюсти, взрослый или ребенок и т.д. Одного размера датчика уже не достаточно!  
У нас есть разные размеры пластин PSPIX<sup>2</sup>, доступные во всех наших операциях, и это важно».*

◀◀◀ **Dr Bhupinder DAWETT**  
*United Kingdom*  
Dental Surgeon



**Size 4\***  
Окклюзионный снимок

◀◀◀ **Dr Todd SNYDER**  
*United States*  
Dental Surgeon, DDS

▶▶▶ *«PSPIX<sup>2</sup> стал долгожданным дополнением к моей стоматологической практике. Это инвестиции, которые снова и снова окупались за счет увеличения объема работы и обучения пациентов».*

*«Использование PSPIX<sup>2</sup> стало жизненно важным в моей повседневной практике. Образцы пластин размером 0 и 1 позволяют мне получать качественные рентгеновские снимки с детьми даже в очень юном возрасте. На самом деле, в отличие от традиционного жесткого датчика, пластины гибкие и легко удерживаются во рту, что обеспечивает больший комфорт и предотвращает любые стрессы».*

◀◀◀ **Dr Matthias PISAPIA**  
*France*  
Dental Surgeon

# ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

**GoldiDent**<sup>™</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

## PSPIX<sup>2</sup> превосходит ваши ожидания ПО ГИГИЕНИЧНОСТИ

### ● АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ

**Только PSPIX<sup>2</sup>** предоставляет такой высокий уровень защиты.

- У PSPIX<sup>2</sup> есть съемные части, которые можно дезинфицировать, что предоставляем вам уникальную возможность избежать рисков инфицирования.
- Вы можете дополнительно установить даже автоклавируемые съемные части.

### ● ОПТИМАЛЬНЫЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ БАРЬЕР

Гигиена стала для нас ключевым фактором при проектировании PSPIX<sup>2</sup>.

- Гигиенические и защитные чехлы обеспечивают высокий уровень защиты от кросс-контаминации.
- Также, у нас есть стилус, для еще более гигиеничного использования аппарата.

*\*Optional autoclavable parts.*





## ПОЗВОЛЬТЕ ЦВЕТУ ВАМ ПОМОЧЬ

Сканер включает подсветку разного цвета в зависимости от текущего статуса!



*СИНИЙ: Доступен*



*ПУРПУРНЫЙ: Сканирует*



*ЖЕЛТЫЙ: Занят другим пользователем*

**PSPIX<sup>2</sup> разработан для легкого использования любым пользователем.**

## CLICK & SCAN

С новым концептом «Сканируй одним нажатием», вы с легкостью получите снимок.

Просто вставьте пластину и позвольте сканеру сделать все остальное.

Вы можете управлять сканером и удаленно, с вашего компьютера.



# 1 АППАРАТ НА ВСЮ КЛИНИКУ

**GoldiDent**<sup>W</sup>  
Ваш поставщик стоматологического оборудования

ПОЛНОСТЬЮ

## АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС

- Сканер начнет работу только когда вы поднесете пластину к сканеру.
- PSPiX<sup>2</sup> автоматически определяет размер пластины.
- Автоматическое сканирование пластины и оптимизация изображения перед выводом на экран, всего за несколько секунд.
- Изображение на пластине сразу стирается и она готова для дальнейшего использования.
- PSPiX<sup>2</sup> автоматически переходит в режим энергосбережения, когда не используется.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## СИСТЕМА

Теоретическое разрешение .....	20 пар линий/мм
Время сканирования (быстрое).....	1.6 с - 2.7 с
Время сканирования (HD).....	2.1 с - 3.6 с
Подключение .....	Ethernet RJ-45
Размеры .....	Ш 154 x Г 204 x В 193 мм
Вес .....	2,6 кг
Рабочее напряжение .....	100 - 240В ~ 50 - 60 Гц

## Windows® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционная система .....	Windows 7 SP1
Процессор.....	Core 2 duo - 3 Гц
Оперативная память.....	2 Гб
Жесткий диск.....	250 Гб
Видео карта.....	512 MB RAM отдельной памяти совместимость с DirectX 9
Разрешение экрана .....	1280 x 1024
Сетевая карта.....	100 Мб/с - 1 Гб/с

## Mac® МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер .....	MacBook® Pro 13.3" или iMac® 21.5"
Операционная система .....	OS X Mavericks
Процессор.....	Intel® Core 2 Duo
Оперативная память.....	2 Гб
Сетевая карта.....	1 Гб/с

## ПЛАСТИНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Размер пластины 0 .....	22 x 35 мм
Размер пластины 1 .....	24 x 40 мм
Размер пластины 2 .....	31 x 41 мм
Размер пластины 3 .....	27 x 54 мм
Размер пластины 4	
(3 шт пластины размера 3) .....	69 x 54 мм

## Windows® РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционная система .....	Windows 10
Процессор.....	Intel Core i5
Оперативная память.....	4 Гб
Жесткий диск.....	1 Тб
Видео карта.....	чипсет Nvidia® или ATI® 2 Гб отдельной памяти совместимость с DirectX 9 или выше
Разрешение экрана .....	1280 x 1024 или выше
Сетевая карта.....	1 Гб/с

## Mac® РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Компьютер .....	iMac 27"
Операционная система .....	OS X El Capitan
Процессор.....	Intel Core i7
Оперативная память.....	4 Гб
Сетевая карта.....	1 Гб/с

Для операционных систем Yosemite и El Capitan требуется компьютер Mac от 2013 г. и новее.

The medical device for dental care PSPiX<sup>2</sup> is of class IIa and manufactured by SOPRO notified body LNE/GMED. This medical device is not refunded by health insurance organizations. Read carefully the instructions on the labelling before use.

PSPiX® and SOPRO® are registered trademarks of SOPRO.  
"All other trademarks cited herein are the property of their respective owners"



## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ

Москва, Гиляровского бс1, оф 212  
Тел +7 495 150 13 23  
E-mail: info@acteongroup.com