



SKEMA 6

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

SKEMA 6

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ВСТРОЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Skema 6 позволяет стоматологам решать любые клинические задачи. Они могут положиться на передовые технологии и исключительную простоту использования. Разработанный для самых требовательных и универсальных стоматологов Skema 6 имеет широкий спектр конфигураций, которые обеспечивают максимально комфортную работу. Технология и эффективность для профессионального развития.



ИДЕАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ



Модель Skema 6 – лучшая модель для стоматологов, которые предпочитают инструменты с подвесными шлангами. Новый дизайн в сочетании с гибкой эргономикой блока ассистента делают эту модель адаптируемой для любых ситуаций. Эргономика и дизайн в одном решении.

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ

Версия Cart обеспечивает свободу движения благодаря своему устройству, которое удобно в любых условиях.
Компактное устройство, эффективность везде.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР

В дополнение к удобному интерфейсу, Skema 6 имеет практичную и элегантную панель управления. Панель управления оснащена семидюймовым сенсорным дисплеем. Стоматологи могут выбрать модель Clinic или модель Multimedia, которая предоставляет дополнительные мультимедийные функции. Технологичная панель управления обеспечивает свободу настройки программ, инструментов и отображаемых данных.






ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ CLINIC

Версия Clinic Skema 6 в стандартной комплектации позволяет просматривать данные консервативных процедур, эндодонтии, имплантологии. Панель управления записывает параметры инструментов, имеет большую базу данных эндодонтических боров, управляет креслом пациента и всеми встроенными системами. Панель управления водонепроницаема, ударопрочна и может поворачивать модуль на 90°.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ MULTIMEDIA

Опциональная Multimedia версия совместима с мультимедийным контентом и имеет USB порт. Это позволяет управлять параметрами любого специализированного стоматологического приложения. Стоматолог может настроить каждый параметр и записать настройки на USB накопитель. Multimedia панель управления имеет дисплей высокого разрешения и большого размера и позволяет видеть изображения под любым углом.

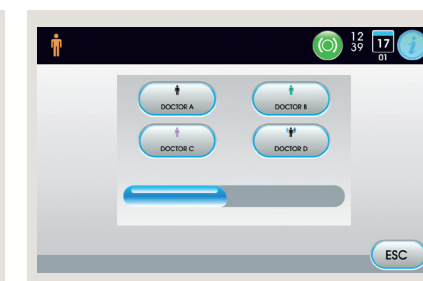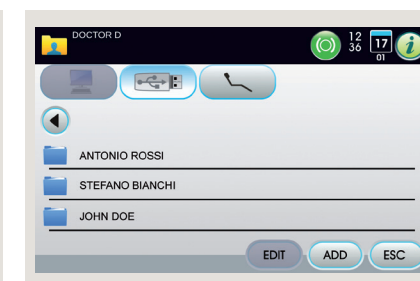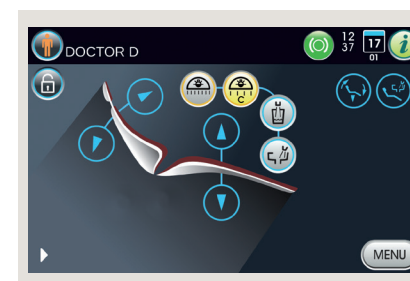

НАСТРАИВАЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС

На дисплее врач может выбрать нужные элементы и цвет. Он может сосредоточиться на своих предпочтениях и не обращать внимания на другие иконки.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОНТЕНТ

Максимальная гибкость при просмотре изображений и другого мультимедийного контента, записанного локально или на USB накопитель. Возможно сохранить до 4 профилей оператора.

НЕСКОЛЬКО ПРОФИЛЕЙ

Возможно сохранить до 4 профилей оператора и на USB накопитель. Сторонний консультант может загрузить свой профиль при работе на стоматологической установке.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ




Skema 6 предоставляет стоматологу ряд устройств и программ для любой имплантологической операции. Skema 6, разработанная специально для имплантологии оснащена мощным микромотором, перистальтическим насосом и панелью управления, которая позволяет настраивать и сохранять скорость, крутящий момент и параметры ирригации.



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС

Встроенный в блок врача, он может управляться с панели управления. Устройство орошает операционное поле физиологическим раствором для обеззараживания.

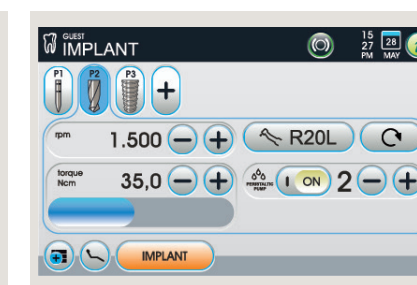

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Дисплей показывает только необходимую на данный момент информацию. Все рабочие параметры могут быть изменены нажатием пальца.




GOLDSPEED EVO R20-L УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

Специально для хирургических операций. Автоклавируемый, может быть разобран для тщательной очистки. С внутренним охлаждением, внешним распылителем и светодиодом со встроенным генератором.




МИКРОМОТОР IMPLANTOR LED

Бесшумный и ультралегкий Implantor LED микромотор не подвержен вибрации и характеризуется высоким крутящим моментом до 70 Нсм.

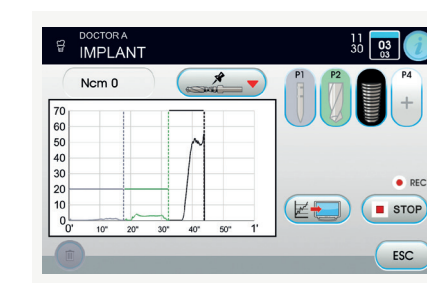


ГРАФИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

Стоматолог может использовать функцию записи графика крутящего момента во время лечения. Документация будет подготовлена в экспортируемой форме.

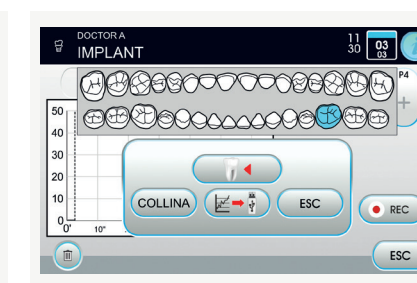

При наличии встроенной камеры возможно просматривать графики на мониторе, что бывает необходимо на тренировочных занятиях.

ЭНДОДОНТИЯ КОНЧИКОМ ПАЛЬЦА

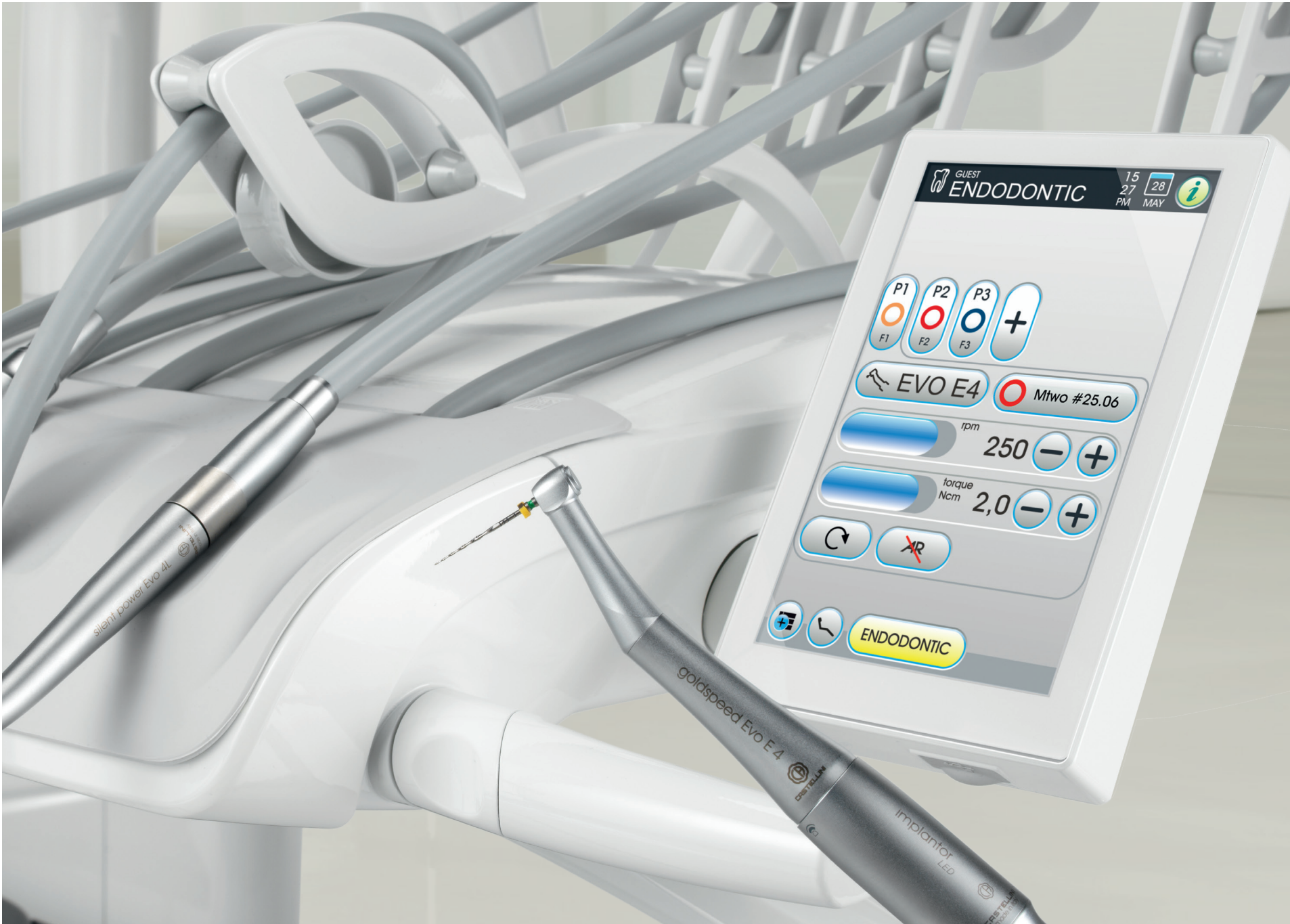


Skema 6 оснащена полным набором инструментов, программ и функций для поддержки эндодонтии. Стоматолог имеет доступ к большой базе данных боров, угловых наконечников и может управлять рабочими параметрами, необходимыми для лечения.



РЕЦИПРОКНЫЙ РЕЖИМ
Режим альтернативного вращения EVO E4 углового наконечника, позволяет использовать RECIPROC®, RECIPROC BLUE® и WAVEONE GOLD® файлы. Торговые марки эндодонтических файлов не принадлежат Cefia или связаным с ней компаниям.



БАЗА ДАННЫХ
Для традиционных эндодонтических процедур панель управления способна автоматически устанавливать оптимальные параметры благодаря встроенной базе данных наиболее распространенных эндодонтических файлов.

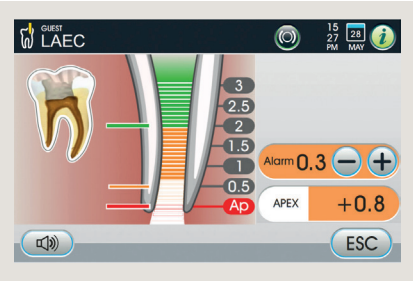

LAEC – ВСТРОЕННЫЙ АПЕКСЛОКАТОР
Устройство помогает врачу локализовать апекс корневого канала с помощью звукового и визуального сигнала. При использовании EVO E4 углового наконечника, встроенная функция APEX-STOP автоматически прерывает вращение при достижении установленного порога.



EVO E4 УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК
Подходит для любого типа эндодонтического лечения. Устройство совместимо реципрокным режимом Castellini и функцией APEX-STOP апекслокатора Castellini.

ПРЕВОСХОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ


За восьмидесятилетнюю историю Castellini разработала и усовершенствовала набор инструментов для любых потребностей в стоматологии. Ее наконечники, скалеры, шприцы и полимеризационные лампы просты в обращении. Изготовленные в соответствии с высокими стандартами они предназначены для консервативной стоматологии, имплантационной хирургии и эндодонтии




SURGISON 2
Специально разработанный для челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и остеотомии, поставляется с большим количеством аксессуаров. Взаимозаменяемый с Piezolight 6 и совместимый с Piezosteril 6, Surgical 2 автоматически определяется стоматологической установкой. Полностью автоклавируемый обеспечивает дополнительное орошение для обеззараживания.

PIEZOLIGHT 6
Многофункциональные ультразвуковые наконечники с фиброоптикой подходят для профилактики, эндодонтии и пародонтальных процедур.

- Идеально линейные ультразвуковые колебания без паразитных колебаний, с саморегулируемой частотой в зависимости от нагрузки.
- Широкий диапазон регулировки мощности.
- Саморегулируемая мощность в зависимости от нагрузки для предотвращения нагрева наконечника.
- Подача охлаждающей жидкости регулируется от 0 до максимума.
- Полностью автоклавируемый.

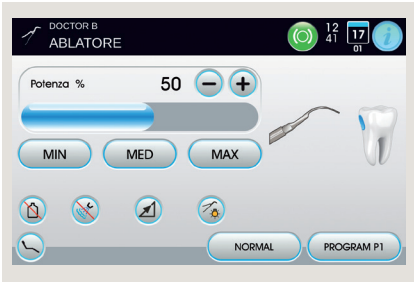

T-LED
Полимеризационная лампа может использоваться в прямой версии или в версии под углом 120°. Светодиод максимальной мощности 2200 мВт/см2 и диапазоном излучения 430 – 490 нм. Имеется 6 предустановленных программ.

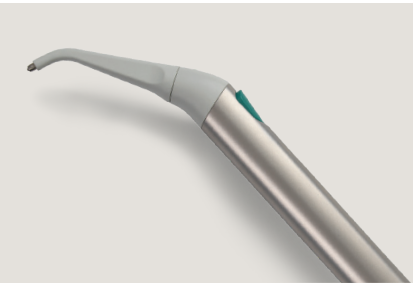

ШПРИЦ
Шприц обеспечивает шесть функций. Ручка и наконечник автоклавируемые.



БЕСШУМНЫЕ, МОЩНЫЕ ТУРБИНЫЕ И УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ GOLDSPEED
Castellini предлагает полный набор турбинных и угловых наконечников для любой области стоматологии..

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С ДИЗАЙНА



ЛЕГКИЙ И КОМПАКТНЫЙ

В модуле врача инструменты с подачей над пациентом

- Вертикальное позиционирование, может быть активировано и деактивировано касанием датчика
- Расширенная возможность удлинения шланга
- Небольшие габариты держателя поворотного лотка
- Инструменты с самобалансом
- Дополнительная система блокировки



РЫЧАГИ С SIDE FLEX ТЕХНОЛОГИЕЙ

Благодаря технологии Side Flex инструменты легко извлекаются. Рычаги могут быть полностью демонтированы. Рычаги с Side Flex доступны как опция.

Le bacchette con tecnologia SideFlex sono fornite in opzione.

В Skema 6 Castellini улучшает эргономику для удобства работы медицинского персонала. Каждый элемент сочетает тонкий дизайн с компактностью. Это приводит к увеличению рабочего пространства.



ЭРГОНОМИКА В ДВИЖЕНИИ

Разработан для стоматологов, предпочитающих навесные шланги. Оснащен семидюймовым сенсорным дисплеем.



МОДУЛЬ ВРАЧА

Инструменты легче захватывать благодаря их расположению и наклону. Шестой инструмент может быть встроен сбоку модуля. Стоматолог может выбрать интраоральную камеру или полимеризационную лампу. Шестой инструмент недоступен если установлен рентгеновский датчик Zen-X.

Держатель лотка можно располагать и перемещать горизонтально.



ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК

Наполнение стакана полностью автоматизировано благодаря оптическому датчику. Плевательница с моторным приводом.



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА

Модуль ассистента установлен на регулируемом по высоте кронштейне, доступен с четырьмя или пятью инструментами. В дополнение к шприцу и всасывающим канюлям можно добавить камеру и полимеризационную лампу. В качестве опции доступен регулируемый держатель лотка.



НАСТРАИВАЕМОЕ КРЕСЛО


Кресло с широким выбором от цвета и типа обивки до подголовника. Педаль ножного управления доступна в проводной и беспроводной версии. Разработанное с учетом требований стоматолога, кресло обеспечивает максимальный комфорт пациента.



КОМФОРТ ПОД РУКОЙ

Конструкция сиденья и спинки комфортна для пациента. Спинка высокопрочная с мягкой, прочной и легко моющейся обивкой. Движения кресла разработаны так, чтобы избежать сдавливания в поясничной области.

Хирургическая прокладка уменьшает точки давления на теле пациента и обеспечивает больший комфорт.

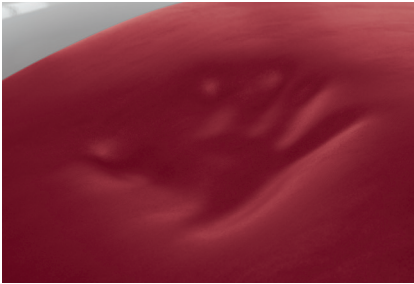


СТИЛЬ В ЭРГОНОМИКЕ

Форма спинки облегчает доступ к операционной зоне как фронтально так и в непрямой видимости. Доступна как опция мягкая обивка, которая подойдет для пациентов любого телосложения.



ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДГОЛОВНИК

В качестве опции предлагается орбитальный подголовник, который поворачивается по трем осям. Кнопка на нижней стороне подголовника приводит его в движение.

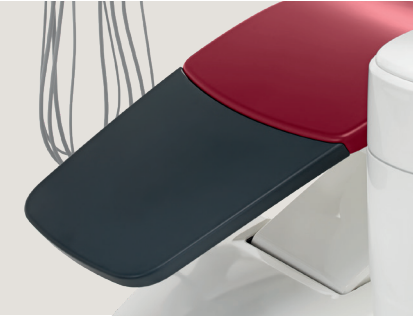

ПОДСТАВКА ДЛЯ НОГ

Подставка для ног может быть быстро продезинфицирована



НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ LATERAL SLIDE

Это устройство позволяет стоматологу управлять подачей воздуха и подачей воды на инструмент, изменять направление вращения микромотора, управлять движением кресла пациента и включать операционную лампу. Доступно в проводной и беспроводной версии.



НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ PRESSURE

Для тех, кто предпочитает управление с помощью давления обеспечивает те же функции, что педаль Lateral Slide. Оба устройства обеспечивают активацию перистальтического насоса и управление переключением программ. Доступны проводная и беспроводная версии.



НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ POWER PEDAL

ретий тип ножного управления включает в себя все функции предыдущих моделей и имеет два дополнительных элемента для вызова сохраненных позиций. Доступны проводная и беспроводная версии.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ДИАГНОСТИКА

Главное преимущество встроенного рентгеновского устройства в том, что информация показывается пациенту в режиме реального времени. Встроенная система состоит из рентгеновского устройства с высокочастотным генератором, беспроводным пультом дистанционного управления и цифровым датчиком, сертифицированным по стандарту IP67.



RXDC С РАСШИРЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ

Благодаря внутренней коллимации и чрезвычайно малому фокальному пятну, рентгеновский аппарат обеспечивает получение высококачественных изображений для быстрой постановки точного диагноза.

Встроенный датчик Zen-X доступен в двух размерах, расположен в модуле врача и позволяет быстрее получить интраоральные рентгеновские снимки. В считанные секунды обработанное изображение появляется на экране монитора и если установлена версия Multimedia на панели управления врача.



ОБЩАЙТЕСЬ СО СТИЛЕМ

Возможность разговаривать с пациентом, используя современные инструменты и технологии облегчает отношения с пациентом. Мультимедийная система Castellini состоит из встроенной камеры с HD датчиком и двадцатидюймовым монитором, сертифицированным EEC.



ВСТРОЕННАЯ HD КАМЕРА

Встроенная камера имеет дизайн для лучшего использования в полости рта и эргономичную ручку. Изображения HD качества обеспечивают максимальную точность исследования.

- Оптическая система с 7 стеклянными линзами и сенсором формата 16:9
- Угол обзора 90°
- Глубина резкости от 5 до 70 мм
- Активация стоп-кадра сенсорной клавишей

Легко прикрепляемый и снимаемый аксессуар Macro Cap увеличивает изображение до 100x, обеспечивая детализацию и четкость



22-ДЮЙМОВЫЙ LED МОНИТОР

22-дюймовый монитор формата 16:9 сертифицированный Medical Device обеспечивает широкий угол обзора. Управление осуществляется Full Touch Multimedia панелью управления, которая позволяет регулировать контрастность, цвет, поворот и Zoom. Монитор может быть встроен в стоматологическую установку с помощью одинарного или двойного крепления.

СВЯЗЬ С КЛИНИКОЙ



ВИРТУАЛЬНЫЙ АССИСТЕНТ

DiVA (Digital Virtual Assistant) – виртуальный ассистент, который оптимизирует вашу работу. Кроме компьютера он может использоваться на смартфонах и планшетах.

Стоматологическая установка Castellini обеспечивает подключение к Интернету с помощью Easy Check для получения дополнительных цифровых услуг. Возможна диагностика в реальном времени и удаленная техническая поддержка.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

С помощью простой информационной панели стоматолог может контролировать все функции стоматологической установки и анализировать работу. В больших клиниках это помогает управлять нагрузкой и планировать техническое обслуживание.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Per operare sempre in condizioni di illuminazione adeguate, è utile poter regolare intensità e temperatura di colore della luce. La nuova lampada Venus LED MCT consente di definire un'impostazione su misura per ogni circostanza. La lampada è caratterizzata dalla rotazione su tre assi ed evita totalmente di provocare zone d'ombra nell'illuminazione del campo d'intervento.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ

Новая лампа Venus LED MCT вращается по трем осям и обеспечивает идеальное освещение операционного поля. Яркость можно настраивать в зависимости от потребностей.

С помощью бесконтактного датчика можно включать, выключать и регулировать интенсивность света до 50000 люкс. Герметичный передний защитный экран легко моется, ручки могут сниматься для стерилизации в автоклаве.

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Инновационная система позволяет освещать теплым, нейтральным и холодным светом, в зависимости от температуры.

ЗНАЧЕНИЕ CRI

Точность цветопередачи по шкале от 0 до 100 выше 95.

КОМПОЗИТНЫЙ РЕЖИМ

Быстрая активация композитного режима предотвращает преждевременное отверждение композитных материалов.



ТЕПЛЫЙ, НЕЙТРАЛЬНЫЙ И ХОЛОДНЫЙ ЦВЕТ

Все температурные переменные от теплой до нейтральной или холодной и наоборот могут быть легко активированы и всегда обеспечивают идеальный обзор операционного поля.

КОМПОЗИТНЫЙ РЕЖИМ

Этот режим изменяет длину волны света для предотвращения преждевременного отверждения композитного материала, обеспечивая при этом оптимальное освещение операционного поля.

ПЕРЕДОВЫЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Со дня своего основания компания Castellini стремится разрабатывать передовые устройства, обеспечивающие стерильность стоматологической установки. Благодаря сотрудничеству с Департаментом общественного здравоохранения и инфекционных заболеваний Римского университета Sapienza и Департамента общественного здравоохранения и педиатрии Туринского университета были улучшены гигиенические системы Skema 6.



M.W.B.

Надежная и эффективная система MWB в сочетании с Peroxu Ag+ действует против вредных веществ в воде. Испытания, проведенные на стоматологической установке в течение 3 месяцев, показали, что регулярное использование MWB и ежедневная дезинфекция с помощью системы Autosteril обеспечивают превосходное качество воды.



AUTOSTERIL

Skema 6 может быть оснащена Autosteril автоматической системой дезинфекции всех контуров распыления воды. Во время цикла инструменты хранятся во встроенной приемной зоне. Обеззараживающее действие системы Autosteril вместе с Peroxu Ag+ сертифицировано Римским университетом Sapienza. Данной дезинфекции достаточно для «уничтожения всех микробов в трубопроводах стоматологической установки». Autosteril позволяет проводить короткие циклы следующих этапов:

- цикл осушения сжатым воздухом;
- добавление 3% H2O2 в контуры распыления воды;
- выдерживание времени для достижения результатов дезинфекции;
- осушение влаги сжатым воздухом;
- промывка водой (водопроводной или дистиллированной).



TIME FLUSHING

При использовании функции Time Flushing происходит полное удаление застоявшейся жидкости из трубопровода.



BOTTIGLIA S.S.S.

Автономная система оснащена герметичным резервуаром, легко доступным снаружи для наполнения или замены.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Благодаря особым деталям в устройстве каждого компонента Skema 6, пациенты и медицинский персонал защищены от риска заражения. Только подход, учитывающий все внешние компоненты стоматологической установки и рабочую среду может решить проблемы гигиены. Это то, чем мы занимаемся в Castellini.



S.H.D.
Промывка водой и специальной жидкостью занимает примерно 2 минуты.



СЪЕМНЫЕ ШЛАНГИ ИНСТРУМЕНТОВ
Съемные и легко дезинфицируемые шланги ускоряют операции по очистке и замене.



СЪЕМНАЯ РУЧКА МОДУЛЯ ВРАЧА
Легко снимается для стерилизации.



СЪЕМНЫЕ РУЧКИ ЛАМПЫ
Легко снимаются для очистки в автоклаве.



СЪЕМНЫЕ РЫЧАГИ
При наличии дополнительной функции Side Flex рычаги можно легко снять для стерилизации.



ЧАША ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА
Устройство для наполнения чашек легко снимается для стерилизации в автоклаве. Чаша плевательница также съемная и может автоклавироваться.





СЪЕМНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАНЮЛЬ
Направляющие канюль в модуле ассистента можно снять для дезинфекции.





ФИЛЬТРЫ+КРЫШКА УСТРОЙСТВА
Защищенные крышкой фильтры снимаются для очистки и сушки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СКЕМА 6

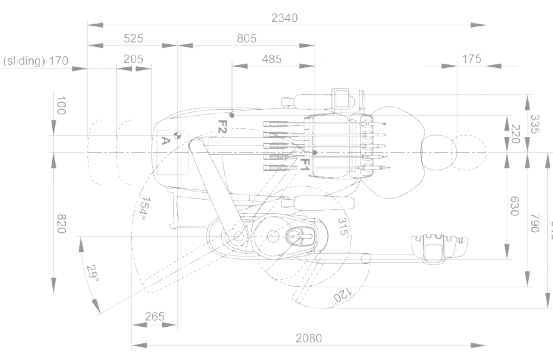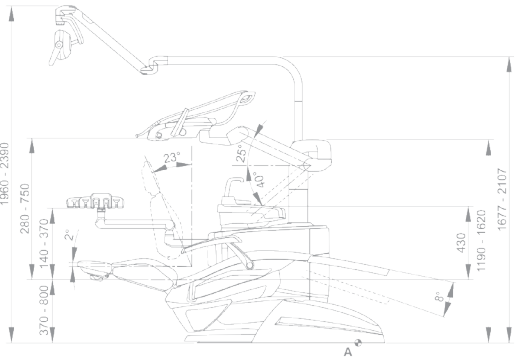

СКЕМА 6 СР

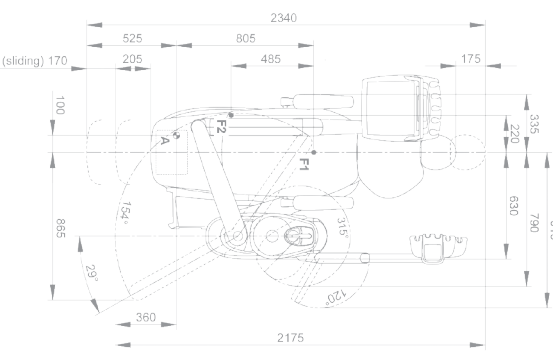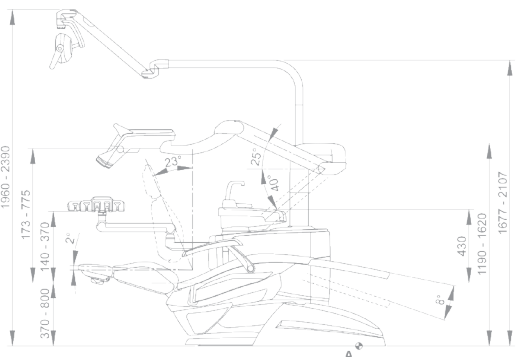

СКЕМА 6 CART

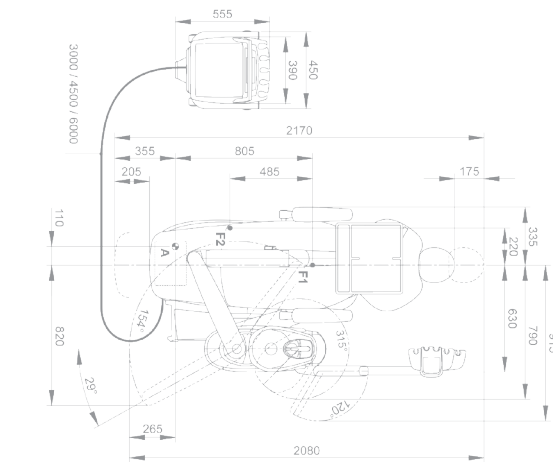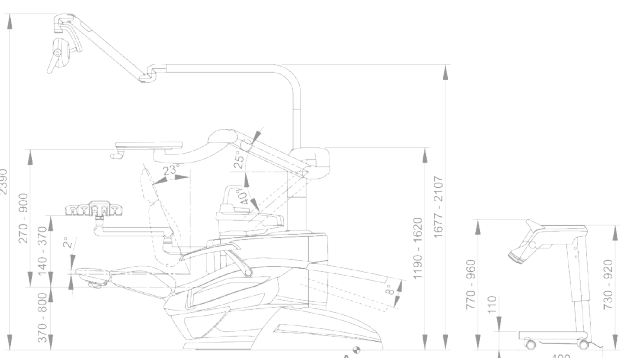

Le misure nei disegni sono espresse in millimetri.



ЦВЕТ ОБИВКИ

- 102 Atlantic blue
- 113 Pacific blue
- 106 Mediterranean blue
- 136 Indian blue
- 101 Caribbean green
- 123 Polynesian green
- 103 Nevada yellow
- 115 Scottish salmon
- 132 Blueberry violet
- 134 Japanese wisteria
- 135 Venetian red
- 130 Graphite black
- 121 Anthracite grey
- 137 Bright silver

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРОКЛАДКА

- 198 Atlantic blue
- 183 Pacific blue
- 196 Mediterranean blue
- 186 Indian blue
- 197 Caribbean green
- 193 Polynesian green
- 182 Nevada yellow
- 195 Scottish salmon
- 192 Blueberry violet
- 184 Japanese wisteria
- 194 Venetian red
- 180 Graphite black
- 199 Anthracite grey
- 187 Bright silver



СКЕМА 6	ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА	НИЖНЯЯ ПОДАЧА	CART [ТЕЛЕЖКА]
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ			
Автономная система подачи жидкости	●	●	●
Autosteril A (Automatic) для дезинфекции водяного контура	○	○	○
Multi Water Bio controller – MWB (EN1717 стандарт, система подачи воды с непрерывной дезинфекцией)	○	○	○
Time Flushing (быстрый цикл промывания водяного контура)	○	○	○
Suction Hoses Disinfection (промывание и дезинфекция системы аспирации)	○	○	○
МОДУЛЬ ВРАЧА			
Система рычагов для инструментов с технологией SideFlex	○	-	-
Полный турбинный набор с наконечником Silent Power Evo 4L с фиброоптикой, быстросъемный	●	●	●
Полный турбинный набор с наконечником Silent Power Evo Miniature с фиброоптикой, быстросъемный	○	○	○
Микромотор Implantor LED с фиброоптикой (100 – 40000 об/мин, 5,3 Нсм	●	●	●
Перистальтический насос с набором для орошения физиологическим раствором	○	○	○
Имплантологическая функция Графики крутящего момента	○	○	○
Скалер Piezosteril 6 с 4 насадками	○	○	○
Скалер Piezolight 6 с фиброоптикой и 4 насадками	○	○	○
Хирургический ультразвуковой набор Surgison 2	○	○	○
LAEC (встроенный апекслокатор)	○	○	○
Модуль для Implantor LED Reciprocating Mode	○	○	○
Полимеризационная лампа T-LED	○	○	○
Фиксатор рычагов инструментов	○	○	○
6-функциональный шприц-пистолет из нержавеющей стали	●	●	●
Набор для шестого инструмента (полимеризационная лампа или интраоральная камера)	○	○	○
Встроенный рентгеновский датчик	○	○	○
МОДУЛЬ АССИСТЕНТА			
Полимеризационная лампа T-LED	○	○	○
3-функциональный шприц-пистолет из нержавеющей стали	○	○	○
6-функциональный шприц-пистолет из нержавеющей стали	○	○	○
Съемные и дезинфицируемые аспирационные шланги	●	●	●
Съемные и автоклавируемые аспирационные канюли	●	●	●
Модуль ассистента на 4 инструмента с панелью управления на кронштейне с самобалансом	●	●	●
Модуль ассистента на 5 инструментов с панелью управления на кронштейне с самобалансом	○	○	○
Держатель лотка на модуле ассистента	○	○	○
ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК			
Лампа Venus LED MCT	●	●	●
ГИДРОБЛОК			
Поворотная съемная чаша плевательница с моторным приводом	●	●	●
Датчик наполнения стакана	●	●	●
Нагреватель воды для стакана	○	○	○
Нагреватель воды для распылителя	○	○	○
Независимый выбор канюль	●	●	●
Быстросъемное соединение для подачи воды/воздуха на внешние устройства	○	○	○
Мультимедийные кабели и соединения для ПК	●	●	●
Держатель лотка вместо чаши	○	○	○
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА			
Пневматический съемный подголовник с вращением по 3 осям	○	○	○
Шарнирный подголовник с вращением по 2 осям	●	●	●
Педаль ногожного управления Lateral slide с джойстиком	●	●	●
Беспроводная педаль ногожного управления Lateral slide с джойстиком	○	○	○
Педаль ногожного управления Pressure-operated с джойстиком и функцией включения/выключения спрея	○	○	○
Беспроводная педаль Pressure-operated с джойстиком и функцией включения/выключения спрея	○	○	○
Педаль ногожного управления Power	○	○	○
Беспроводная педаль Power	○	○	○
Левый подлокотник	○	○	○
Правый подлокотник	○	○	○

● = базовая комплектация ○ = опция - = недоступно